



Cliquez *OK*

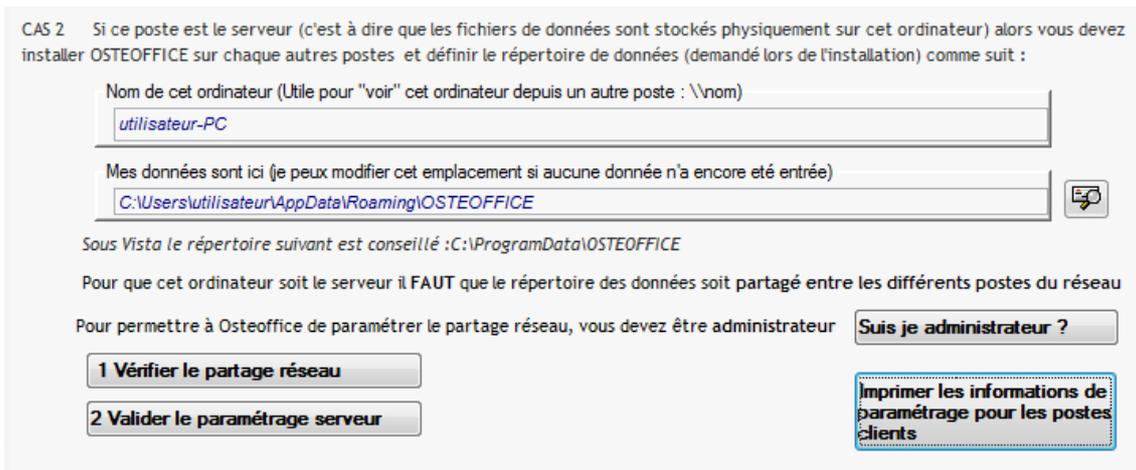


Cliquez sur '*Vérifier le partage réseau*'

Osteoffice va vérifier que le répertoire des données est accessible par les autres ordinateurs connectés (une fenêtre noire avec du texte défilant rapidement va apparaître puis se fermer).

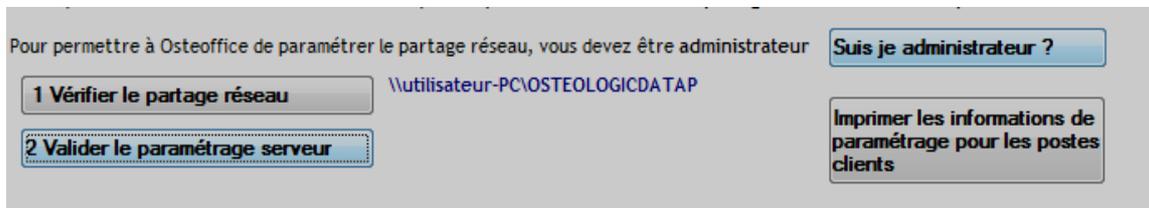

Si la mention `\\utilisateur X \OSTEOLOGICDATAP` n'apparaît pas cela indique que le réseau Windows n'est pas correctement installé ou que vous n'avez pas le statut administrateur de Windows N'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour paramétrer Windows

Si cette mention apparaît cliquez sur *Valider le paramétrage réseau*

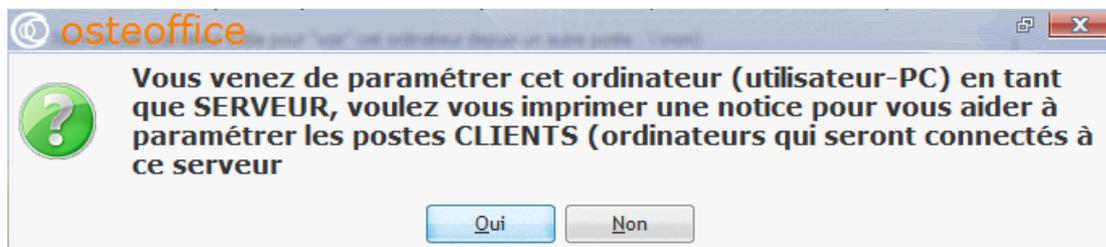

Choisir *OUI*

Un guide va être imprimé. Il détaille le paramétrage à effectuer sur les autres postes (appelés CLIENT car il se connectent au SERVEUR pour obtenir leurs données)



Suivez la procédure imprimé sur tous les postes CLIENT

Si au point 3 le clic sur :

**2 : Tester le serveur**

ne répond pas OK : votre réseau WINDOWS n'est pas correctement installé

si le clic sur :


**3 : Tester les données**

puis Valider le paramétrage si le test des données est OK


Si **le test des données répond ECHEC ou INCOMPLET** cela signifie que le partage du répertoire de données n'est pas total

### Le paramétrage de Windows ne permet pas la communication entre les ordinateurs

I Vérifiez que les 'groupe de travail' des ordinateurs sont bien identiques (WORKGROUP par exemple) pour y accéder : clic droit sur Ordinateur (Vista , W7) ou poste de travail (XP) puis propriétés

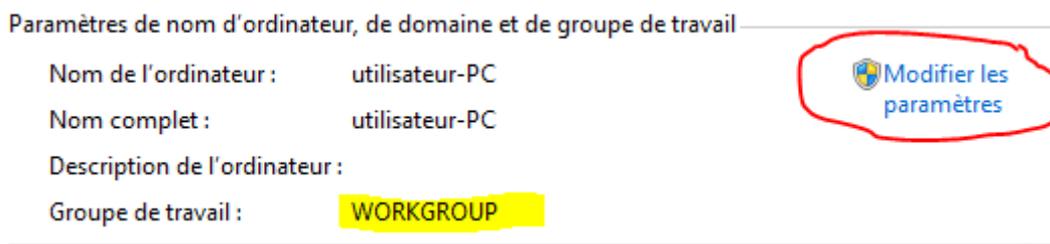

## II Ensuite, ouvrez le centre réseau et partage (W7)

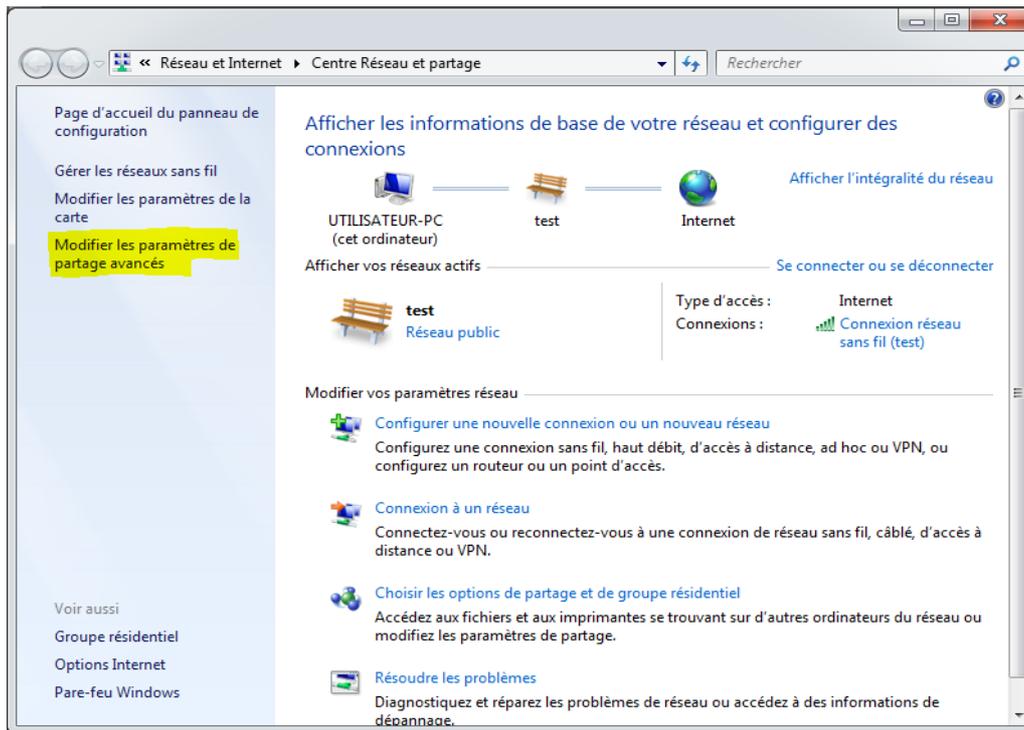

Cliquez sur 'modifier les paramètres de partage avancés'  
vérifier que le partage soit **ACTIVE**

### Partage de fichiers et d'imprimantes

Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.

- Activer le partage de fichiers et d'imprimantes
- Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes


Vérifier que la protection par mot de passe soit **DESACTIVEE**

### Partage protégé par mot de passe


Lorsque le partage protégé par mot de passe est activé, seules les personnes disposant d'un compte d'utilisateur et d'un mot de passe sur cet ordinateur peuvent accéder aux fichiers partagés, aux imprimantes connectées à l'ordinateur et aux dossiers publics. Pour donner accès à d'autres personnes, vous devez désactiver le partage protégé par mot de passe.

- Activer le partage protégé par mot de passe
- Désactiver le partage protégé par mot de passe


III Ouvrez l'explorateur Windows et tapez le nom du serveur précédé de \\ dans la barre d'adresse «\\utilisateur-PC » (dans notre exemple)

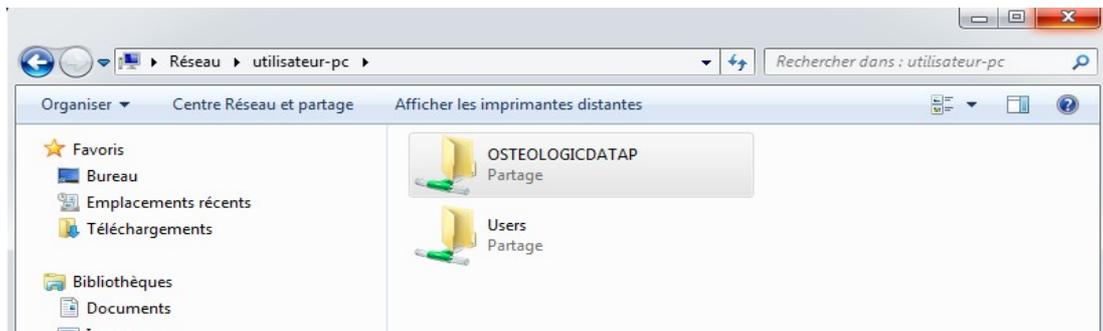


Clic droit sur OSTEOLOGICDATAP choisir PROPRIETE  
Sélectionner le 2<sup>nd</sup> onglet (Partage)

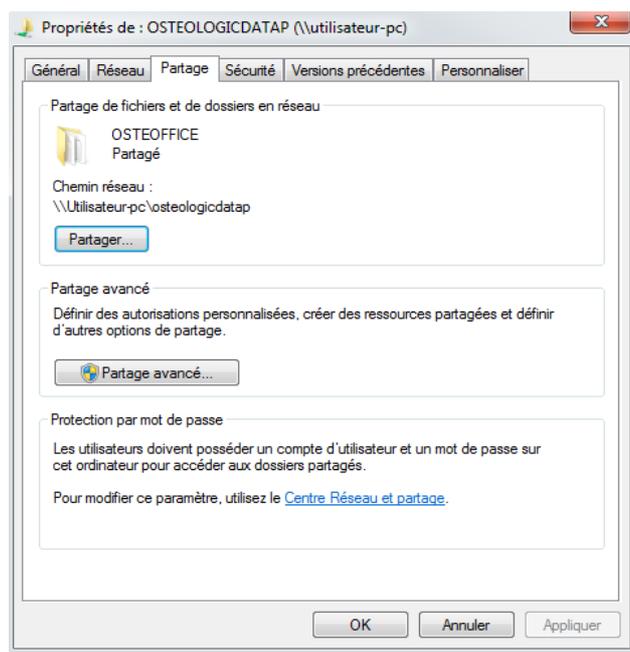

Cliquez sur **partage avancé**

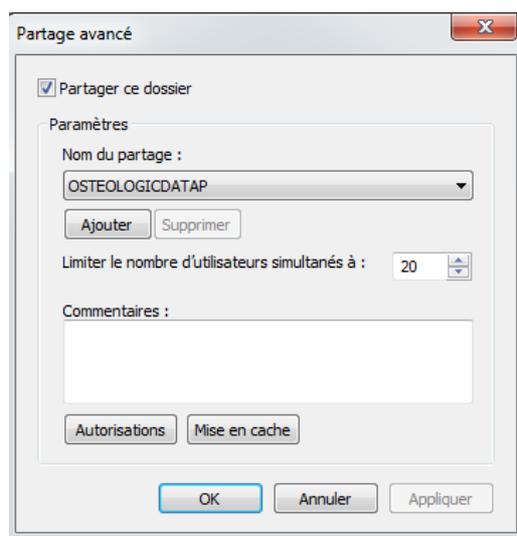


Cliquez sur **Autorisations**

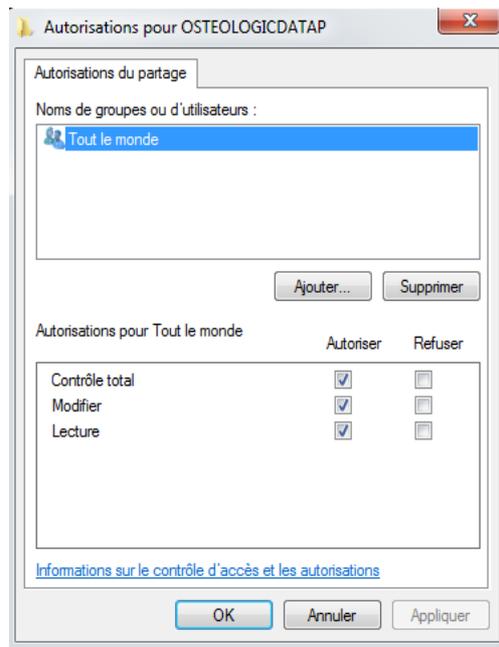


Vérifier que 'Tout le monde' a le contrôle total COCHE  
Validez toutes les fenêtres en cascade

IV Vérifiez les propriétés des cartes réseaux elle doivent inclure les protocoles Ipv4 et Ipv6

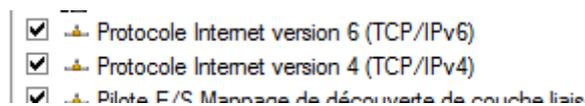

et pour les deux être paramétrées pour l'obtention automatique d'une adresse IP

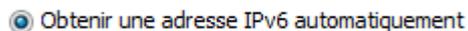

NB : Le mode réseau fonctionne avec Osteoffice en mode EVALUATION mais sera automatiquement limité à 30 jours.

Ensuite vous devrez avoir enregistré tous les postes par l'achat d'une licence.

**ATTENTION : Le SERVEUR doit être allumé (qu'Osteoffice soit en cours d'utilisation ou pas) pour que le(s) CLIENT(S) puissent fonctionner et accéder aux données**